


b. BLANDINO®

Soluzioni in movimento

Made in Italy
da oltre 60 anni

Sistemi *di* Postura

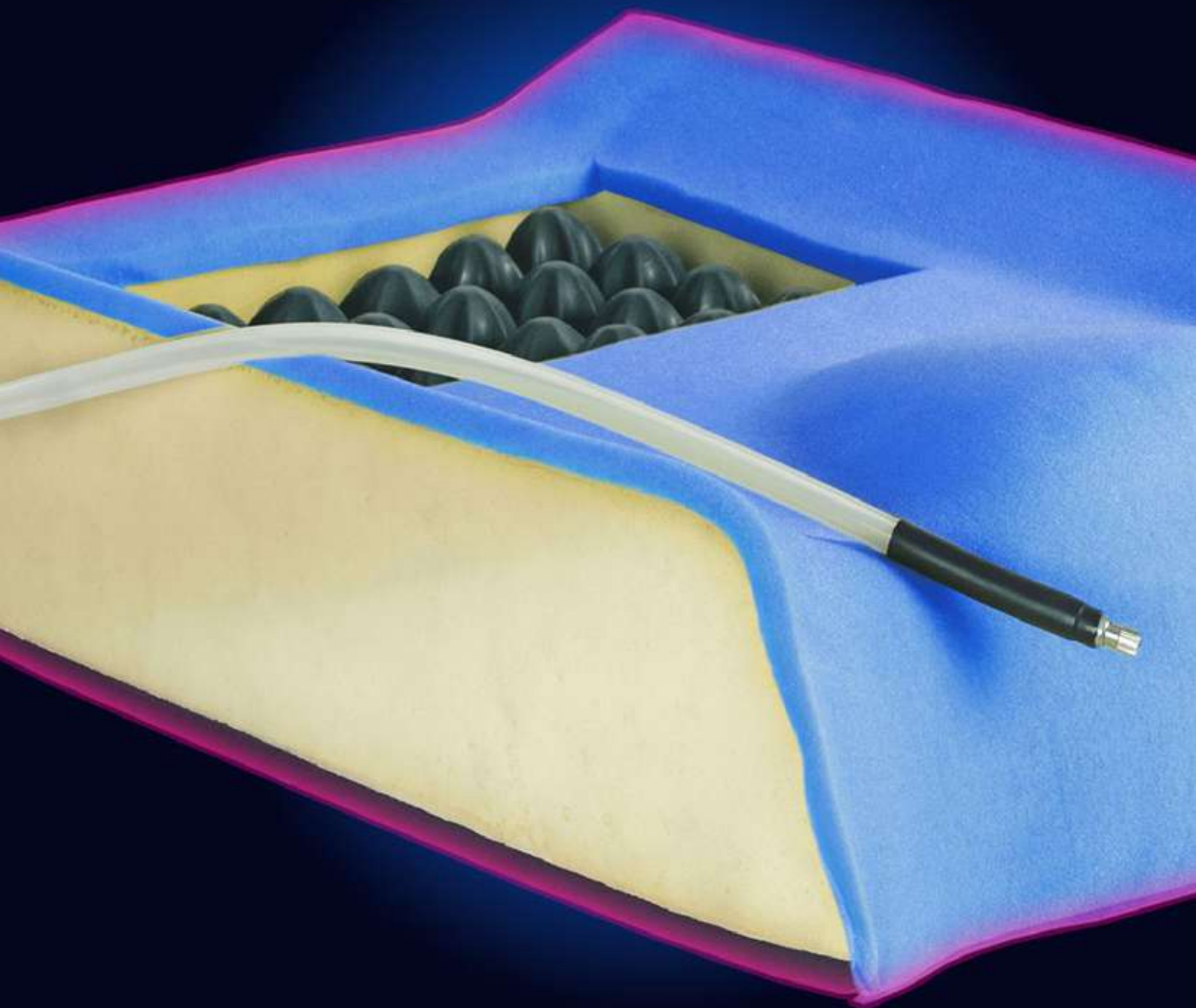

I Cuscini

Linea **b. Shape**

Linea



Shape

Validi supporti per migliorare la vita quotidiana.
Robusti e sicuri offrono sempre stabilità e comfort.

Progettiamo e realizziamo supporti posturali studiati per garantire stabilità, comfort e sicurezza in ogni situazione.

Tutti i sistemi posturali **b.Shape** nascono in Italia, frutto di un'attenta lavorazione e di una qualità artigianale che fa la differenza.

Questa attenzione ci consente di offrire ampie possibilità di personalizzazione, rendendo ogni soluzione posturale davvero efficace e su misura per l'utilizzatore.

Il nostro obiettivo è migliorare concretamente la qualità della vita, ogni giorno.

I Cuscini

Soluzioni comode per un supporto ottimale in ogni situazione

I cuscini posturali **b.Shape** sono studiati per fornire un valido supporto ed adattarsi alla corretta conformazione del bacino dell'utente.

La progettazione si basa su soluzioni che evitano lo schiacciamento dei tessuti sottocutanei in corrispondenza delle aree a maggior carico pressorio, al fine di prevenire il danneggiamento dell'epidermide.

Le fodere sono realizzate con uno speciale tessuto traspirante che favorisce l'evacuazione dell'umidità residua della pelle.

Il trattamento opzionale AQUAZERO consente, nei casi di incontinenza, di bilanciare la protezione della cute e quella dell'imbottitura.



Come riconoscere la soluzione più adatta a te

La nostra esperienza ci permette di progettare soluzioni adatte a diverse esigenze di utilizzo.

Realizziamo prodotti progettati per facilitare la mobilità degli adulti, accompagnare la crescita dei più giovani e, nei casi di incontinenza, garantire un adeguato equilibrio tra la protezione della cute e la salvaguardia dell'imbottitura.

Ogni soluzione deriva da un'attenta valutazione dell'età, delle abitudini e delle caratteristiche dell'utilizzatore. Il risultato è una gamma di prodotti confortevoli, affidabili e funzionali, progettati per favorire una maggiore autonomia e libertà di movimento, sia in ambiente domestico sia all'aperto.

Misurazione Antropometrica

1

Nella scelta del cuscino si rende necessaria la rilevazione di due misure antropometriche: la larghezza del bacino e la profondità della seduta dal cavo popliteo al punto di appoggio sullo schienale.

Individuazione del modello

2

Il tecnico ortopedico abilitato sarà in grado di selezionare il cuscino posturale più adatto, tenendo conto delle condizioni patologiche dell'utilizzatore e delle indicazioni del medico prescrittore. È fondamentale considerare anche l'aspetto preventivo, insieme alla necessità di stabilizzare il bacino.

Individuazione della misura del cuscino

3

Compatibilmente con l'ausilio su cui sarà installato il cuscino, le due misure da determinare sono la larghezza e la profondità, partendo dalle misure antropometriche rilevate.

• **LARGHEZZA:** Si consiglia di scegliere la misura più vicina al valore rilevato, arrotondandola, per garantire una stabilizzazione ottimale ed una corretta distribuzione dei carichi.

• **PROFONDITÀ:** È necessario considerare la geometria specifica di ciascun cuscino.

Scelta degli accessori disponibili

4

Per meglio rispondere alle esigenze specifiche dell'utilizzatore, è possibile personalizzare il cuscino scegliendo tra differenti accessori.

- **FODERA BIELASTICA IMPERMEABILE** o traspirante con trattamento idrofobo **AQUAZERO**
- **TASCA PORTAOGGETTI**
- **INSERTO POSTURALE MODELLABILE**

Installazione sull'ausilio

5

Il tecnico ortopedico abilitato sarà in grado di installare i nostri cuscini posturali, in modo facile e veloce, assicurando una stabilizzazione ottimale ed una corretta distribuzione dei carichi, per offrire un supporto stabile e adeguato al bacino.



Descrizione

Il cuscino **b.Basic** rappresenta la soluzione entry level della gamma b.Shape, progettata per garantire supporto posturale affidabile e un adeguato livello di comfort.

È indicato per utenti con buona integrità e tonicità cutanea, che necessitano di un sistema stabile e performante per il mantenimento della corretta postura.

La struttura assicura una distribuzione uniforme delle pressioni e una solida stabilità dimensionale, contribuendo al benessere quotidiano e alla sicurezza d'uso.

Classificazione ISO – RDM

Attenzione: i codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

ISO 18.09.39.006 modulo posturale per bacino

RDM 2789058/R

Qualità specifiche

PREVENZIONE



STABILIZZAZIONE



Caratteristiche Tecniche


- Base preformata in espanso dallo shape decisamente pronunciato con scarico passivo cocchigeo a portanza incrementale per una migliore distribuzione pressoria
- Rivestimento in memory foam POLAR bugnato da 2 cm che accentua le caratteristiche preventive e dona una immediata sensazione di comfort

Misure Disponibili

Profondità	Larghezza			
	36	40	45	50
41	✓	✓	✓	✓
46	✓	✓	✓	✓

✓ = disponibile in tutte e tre le altezze

✗ = non disponibile

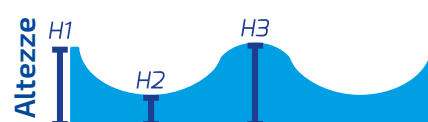

H1: 10 cm - H2: 7 cm - H3: 11 cm



Descrizione

Il cuscino **b.Flow** è progettato per rispondere alle esigenze di chi necessita di un elevato livello di prevenzione antidecubito, senza rinunciare a un efficace contenimento posturale.

La presenza di un materiale fluido all'interno del cuscino favorisce una maggiore stabilità, riducendo le forze di taglio nella zona ischiatica e contribuendo a mantenere una postura corretta. Inoltre, assicura un controllo ottimale della temperatura, garantendo comfort anche in condizioni ambientali estreme, sia di caldo che di freddo.

Classificazione ISO – RDM

Attenzione: i codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

ISO 18.09.39.006 modulo posturale per bacino

RDM 2607006/R

Qualità specifiche

PREVENZIONE



STABILIZZAZIONE



Caratteristiche Tecniche


- Base preformata in espanso dallo shape decisamente pronunciato con scarico passivo cocchigeo a portanza incrementale per una migliore distribuzione pressoria
- Sacca gel a settori con fluido ad alta inerzia termica, posizionata nella zona ischio sacrale, che minimizza gli sbalzi caldo/freddo

Misure Disponibili

Profondità	Larghezza			
	36	40	45	50
41	✓	✓	✓	✓
46	✓	✓	✓	✓

✓ = disponibile in tutte e tre le altezze

✗ = non disponibile

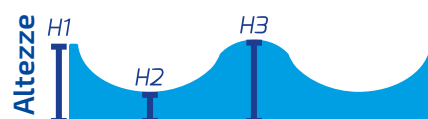

H1: 10 cm - H2: 7 cm - H3: 11 cm



Descrizione

Il cuscino **b.Cell** è progettato per combinare un efficace contenimento posturale con un elevato livello di prevenzione del decubito nella zona ischiatica. È particolarmente indicato in situazioni di simmetria o lieve asimmetria, dove non è richiesta una personalizzazione modulare complessa.

Dal punto di vista preventivo, l'inserto a bolle d'aria in caucciù naturale offre un'eccellente distribuzione delle pressioni e, con l'utilizzo dell'isolatore di celle (opzionale), consente di scaricare completamente aree specifiche soggette ad arrossamento. Per esigenze di maggiore personalizzazione posturale, l'inserto rigido modellabile permette di creare configurazioni su misura, adattandosi in modo preciso alle necessità dell'utilizzatore.

Classificazione ISO – RDM

Attenzione: i codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

ISO 18.09.39.006 modulo posturale per bacino

RDM 2789097/R

Qualità specifiche

PREVENZIONE



STABILIZZAZIONE



Caratteristiche Tecniche


- Base preformata in espanso dallo shape decisamente pronunciato
- Inserto a bolle d'aria a 1 valvola, realizzato in caucciù naturale, con possibilità di installazione, se necessario, dell'isolatore di celle, che permette lo scarico completo di una zona specifica
- Rivestimento in memory foam POLAR da 1 cm che ne accentua le caratteristiche tecniche specifiche

Misure Disponibili

Profondità	Larghezza			
	36	40	45	50
41	✗	✗	✗	✗
46	✓	✓	✓	✓

✓ = disponibile in tutte e tre le altezze

✗ = non disponibile

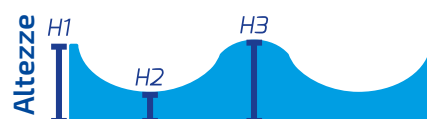

H1: 10 cm - H2: 7 cm - H3: 11 cm



Descrizione

Il cuscino **b.Cell duo** è studiato per integrare i tre elementi fondamentali di un sistema di postura per il bacino: contenimento posturale, elevata prevenzione del decubito nella zona ischiatica e gestione efficace delle situazioni caratterizzate da marcata obliquità o rotazione.

Grazie all'inserto a due settori differenziati, è particolarmente indicato nei casi di forte asimmetria, obliquità o rotazione del bacino, dove non è necessaria una personalizzazione modulare complessa.

Le celle d'aria in caucciù naturale assicurano inoltre un altissimo livello di prevenzione, favorendo una distribuzione ottimale delle pressioni e contribuendo al mantenimento di una postura stabile e confortevole.

Classificazione ISO – RDM

Attenzione: i codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

ISO 18.09.39.006 modulo posturale per bacino

RDM 2789110/R

Qualità specifiche

PREVENZIONE



STABILIZZAZIONE



Caratteristiche Tecniche


- Base preformata in espanso dallo shape decisamente pronunciato
- Inserto a bolle d'aria a 2 valvole, realizzato in caucciù naturale, con facile accesso frontale ed apposita tasca a scomparsa
- Rivestimento in memory foam POLAR da 1 cm che ne accentua le caratteristiche tecniche

Misure Disponibili

Profondità	Larghezza			
	36	40	45	50
41	✗	✗	✗	✗
46	✓	✓	✓	✓

✓ = disponibile in tutte e tre le altezze



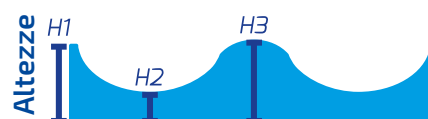

✗ = non disponibile



H1: 10 cm - H2: 7 cm - H3: 11 cm

Accessori

✓ = disponibile X = non disponibile

		basic	flow	cell	cellduo
	Fodera bielastica impermeabile	✓	✓	✓	✓
	Fodera traspirante AQUA ZERO (idrofobo)	✓	✓	✓	✓
	Tasca portaoggetti	✓	✓	✓	✓
	Inserto posturale modellabile STABILIZZAZIONE	✓ ●●●●○	✓ ●●●●○	✓ ●●●●○	✓ ●●○○○

Schede Ordine

Se hai individuato la soluzione più adatta alle tue esigenze, scarica subito la scheda d'ordine: ti basta inquadrare il QR code qui a lato.

Trova il modello di tuo interesse, compila digitalmente il PDF in tutti i campi e inviaci la scheda via e-mail. Sarai ricontattato al più presto da un nostro tecnico specializzato, pronto ad offrirti supporto e consulenza dedicata.



Conformità

Conforme ai requisiti previsti dal Regolamento 2017/745/MDR


Codici RDM 2789058/R, 2607006/R, 2789097/R, 2789110/R

Codice ISO 18.09.39.006*

*Il codice ISO riportato è indicativo e soggetto ad approvazione da parte del medico prescrittore



Riferimenti di contatto


 **Sede:** Corso Novara, 25 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALY

 **Ordini / Commerciale:** +39 011 2277481


 **Sup. Tecnico / Assistenza:** +39 011 2277482

 **Informazioni:** info@blandinocare.it

 **Ordini / Commerciale:** commerciale@blandinocare.it

 **Sup. Tecnico / Assistenza:** assistenza@blandinocare.it

 **Sito:** www.blandinocare.it

 **I nostri orari:** da Lunedì a Venerdì:

Mattino: 8.00 - 12.30
Pomeriggio: 13.30 - 16.30